

## Laporan Pengujian Sterilisator Kering

No. Label: 394105

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RSU Negara 2. Merek : Elitech : ZTP80A 3. Model/Tipe 4. No. Seri : 76F4 13030152

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan

2. Tanggal : 07 April 2022 C. Kondisi Ruang 1. Suhu 27.5

2. Kelembaban Relatif 53.5 %RH

: IGD

D. Alat yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur metalui LK-053-IDN)

3. Temperature Data Logger, Merk: Madgetech, Model/Type: Hi Temp 150, S/N N35106 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat


Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Power Cord	Beik	Baik	-
Switch On Off	Baik	Baik	
Panel Switch	Baik	Baik	
ndikator Suhu	Baik	Baik	•
ndikator Tekanan Chamber	Baik	Baik	
emperatur Adjuster	Baik	Baik	5
Regulator Tekanan	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	228.1	220 ± 10 % V
Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	30	≥ 20 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.145	≤0.2 Ω
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.7	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.7	≤ 500 µA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.6	≤100 µA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.7	≤ 500 µA

Hasil Pengukuran Kinerja Autoclave

Setting Alat	Date and Time (UTC+07:00)	Channel 1 Probe Temperature (°C)
Fix	13:45:55	139.47
	13:46:10	139.62
	13:46:25	139.73
	13:46:40	139.82
	13:46:55	139.88
	13:47:10	139.90
	13:47:25	139.89
	13:47:40	139.88
	13:47:55	139.81
	13:48:10	139.73

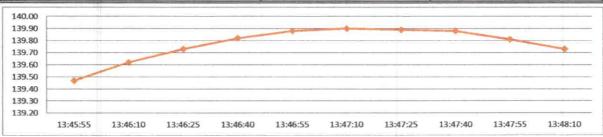

### H. Keterangan

1. Alat ini diuji mengunakan metode pengujian MP/UJI/T-02

#### Kesimpulan

 Berdasarkan MP/UJI/T-02 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

#### J. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

# APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Telp.

Fax.

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280